


Mise à jour du HeartSine samaritan® PAD (1.4.2/3.2.0)


Guide de l'utilisateur

1

Après avoir téléchargé et installé le PadUpgrader :

Cliquez sur l'icône du PADUpgrader  située sur le bureau de l'ordinateur; sinon, appuyez sur Démarrer et sélectionnez le PADUpgrader.

Après quelques secondes, la fenêtre 'PAD Upgrader – (1.4.2/3.2.0)' devrait apparaître.

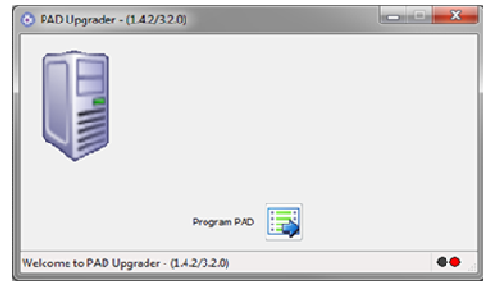


2

Branchez le PAD au port USB de l'ordinateur


Après quelques secondes, l'icône du samaritan® PAD apparaîtra et l'indicateur de connexion passera au vert.

Icône du samaritan® PAD
Indicateur de connexion

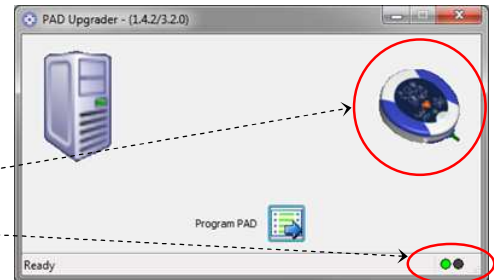


3

Effectuez la mise à jour

Cliquez sur le bouton 'Program PAD'  (programmer le PAD) pour lancer la mise à jour.

Suivez les instructions à l'écran.

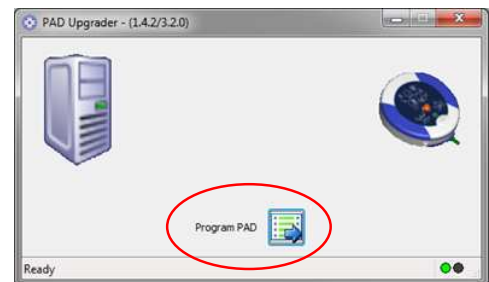


4

Renvoyez la preuve de mise à jour

Après une mise à jour réussie, un fichier PDF sera créé sur votre bureau. Veuillez renvoyer ce fichier par l'un des procédés suivants :

1. Email à support@heartsine.com
2. Courrier postal à
HeartSine Technologies
Canberra House
203 Airport Road West
Belfast
BT3 9ED
Royaume-Uni
3. Télécopie au +44 (0)28 9093 9401

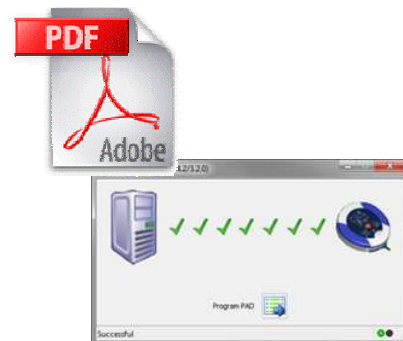

Avertissement important



Si une erreur se produit pendant la mise à jour, le Samaritan® PAD **ne doit pas être utilisé** tant que la mise à jour n'a pas été menée à bien.

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre distributeur ou envoyez un email à support@heartsine.com