


Upgrader samaritan® PAD HeartSine® (1.4.1/2.0.6)

Istruzioni per l'utente

1

In seguito al download e all'installazione di PadUpgrader:

Fare clic sull'icona PADUpgrader  situata sul desktop del computer oppure premere il pulsante Start e selezionare PADUpgrader

Dopo alcuni secondi, dovrebbe apparire la finestra 'PAD Upgrader-(1.4.1/2.0.6)'.




2

Collegare il PAD alla porta USB del computer.


Dopo alcuni secondi, apparirà l'icona del samaritan® PAD e l'indicatore del collegamento diventerà verde.

icona del samaritan®
indicatore del collegamento

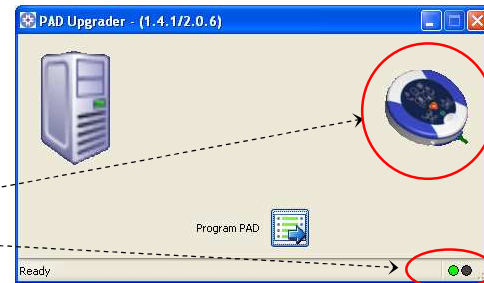


3

Eeguire l'aggiornamento.

Fare clic sul pulsante 'Program PAD'  per avviare l'aggiornamento.

Seguire le istruzioni sullo schermo.

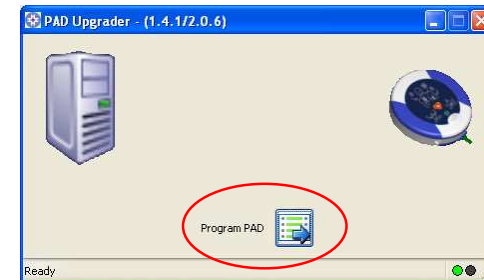

4

Inviare l'attestazione dell'esecuzione dell'aggiornamento.

Dopo aver eseguito l'aggiornamento con successo, sul Desktop sarà creato un file .pdf. Inviarlo nei modi seguenti:

1. Via e-mail all'indirizzo support@heartsine.com
2. Stamparlo e spedirlo a: HeartSine Technologies
Canberra House
203 Airport Road West
Belfast
BT3 9ED
Regno Unito
3. Inviarlo via fax al numero +44 (0)28 9093 9401




5

Questo passaggio si applica solo al SAM 300. NON si applica ai dispositivi SAM 300P.

Dopo aver eseguito l'aggiornamento con successo, verificare che sul dispositivo sia apposta l'etichetta AHA/ERC 2005. Se l'etichetta non è presente, individuarla e apporla come mostrato.

AHA/ERC 2005
150J-150J-200J

AHA/ERC 2005
150J-150J-200J

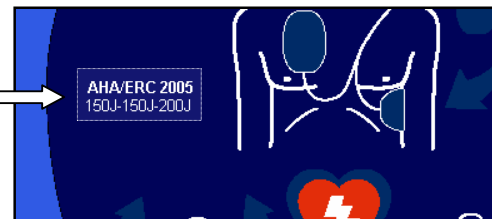

Avvertenza importante



Se si verifica un errore in qualsiasi momento durante l'aggiornamento, il samaritan® PAD **non deve essere utilizzato** fino a quando l'aggiornamento non sarà eseguito correttamente.

In caso di domande, contattare il proprio distributore o inviare un'e-mail all'indirizzo support@heartsine.com